

NEW!

島津オートグラフ AGX 用ロードセル保護ケース

ロードセルとキャリコネクタをセットで収納、大切なセンサーを安全に保管できます。

- Point**
- ・ロードセルに合わせた収納デザイン。とてもコンパクトで持ち運びにも便利です。
 - ・防水性、防塵性、耐衝撃性に優れ、重要なセンサーを守ります。



項目	仕様
対象装置	島津オートグラフ AGX-V
対象ロードセル	SLBL (New Type) 10N ~ 5kN
寸法 (mm)	外寸: W315 × D259 × H152 内寸: W220 × D170 × H132
質量 (kg)	1.5
防水防塵性能	JIS 保護等級: IP65
ケース材質	強化ポリプロピレン樹脂
カラー	黒

※画像は使用例です。製品にロードセルは含まれません。

P/N	品名	希望販売価格 (円)	備考
F00733296	ロードセル保護ケース	35,000	島津オートグラフ AGX-V 用 SLBL 型ロードセルに限りです

NEW!

試験片保持ユニット

サンプルホルダーで試験片を保持するため、両手でつかみ具開閉操作を行うことができます。

- Point**
- ・つかみ具開閉操作を両手で行うことにより、安全性がアップします。



項目	仕様
取付可能装置	取付可能装置: 島津オートグラフ AGS-X、AG-X 卓上機
対象つかみ具	対象つかみ具: 空気平面式つかみ具 1kN 以下
サンプルホルダー (つかみ) 位置の高さ	横方向取付け時: テーブル面より 204mm 298mm 前後方向取付け時: テーブル面より 221mm 315mm (フレーム組み換えにより調整可能)

P/N	品名	希望販売価格 (円)	備考
F01209999	試験片保持ユニット FGD-001	70,000	—
F01219999	前面取付プレート (AG-X 用)	10,000	前後方向に設置する際必要です
F01229999	前面取付プレート (AGS-X 用)	10,000	

試料のすべりを押さえるためにおすすめです。

P/N	品名	希望販売価格 (円)	備考
F00743296	ラバーシート	3,000	すべり止め用ラバーシート (A4 サイズ)

NEW!

島津発光分析装置用 Ar 加圧器透明びんキット

Ar 加圧器内の水の量や汚れに対する視認性が大幅にアップします。

- Point**
- ・加圧器内の水の状態が一目で確認できるので、メンテナンスのタイミングを逃しません。
 - ・加圧器付属の接続パイプ内の汚れ除去のため、ブラシ (支持台付き) を用意しました。
 - ・水交換の際、接続パイプを保持するための支持棒付きです。



構成部品名	入数
PP 製透明びん 1L	1 本
加圧器接続金具装着用穴あきキャップ	1 個
支持棒	1 本
同上用固定台 (PP 三角柱高さ 50mm、底面一辺 50mm 正三角形)	1 個
接続パイプ清掃用ブラシ 10 φ	1 本
同上用固定台 (PP 三角柱高さ 100mm、底面一辺 50mm 正三角形)	1 個
固定台貼付用両面テープ (2 種類)	1 式
取扱説明書	1 部



◀使用例


P/N	品名	希望販売価格 (円)	備考
F00683296	島津発光分析装置用 Ar 加圧器透明びんキット	15,000	—
F00693296	Ar 加圧器透明びん (単体)	1,600	標準キャップ付き

NEW!

耐震ストッパー

地震時の装置転倒を防ぎます。

- Point**
- ・段積み式や一体型の HPLC などの転倒防止におすすめです。

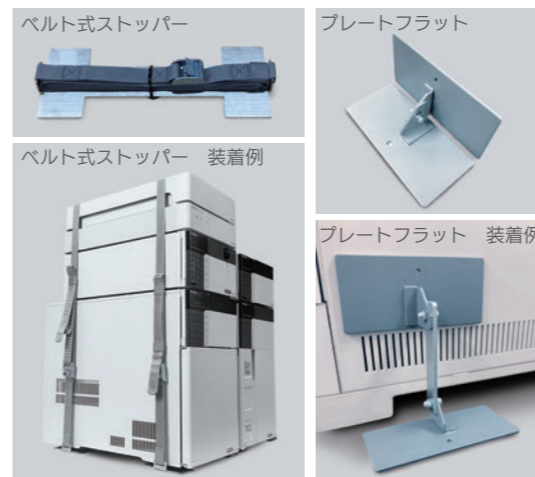

項目	仕様			
品名	ベルト式ストッパー LH-940P	プレートフラット LLBPS	ベルト (4m) LH-404PS	プレートフラット用連結板 150mm
構成	2 個 1 組	2 個 1 組	1 本	1 本
素材	ステンレス、鋳物、 アクリル系接着材、 ポリプロピレン	処理鋼板、 メッキ処理ねじ類、 アクリル系接着材	亜鉛合金、 ポリプロピレン	処理鋼板
概寸 (mm)	金具: W290 × D124 × H20 ベルト有効長: 約 2,270	W118 × D57 × H57	W32 × L4000 × H22	W16 × L150 × t3
重量 (g)	約 450 (1 個)	約 270 (1 個)	約 80	約 60
対象物重量 (kg)	150 (2 個)	120 (1 個)	250 (1 本)	—

P/N	品名	希望販売価格 (円)	備考
F00533296	ベルト式ストッパー LH-940P (2 個セット)	40,000	LC-20A/30A/40A 等段積み 1 列に 1 組必要です
F00543296	プレートフラット LLBPS (2 個セット)	20,000	i シリーズ、SIL-30CMP には、別途連結板が必要です
F00593296	ベルト (4m) LH-404PS	5,000	2 本掛けを推奨します
F00613296	プレートフラット用連結板 150mm	5,500	LC 側面の通気スリット回避のため必要です
F00623296	I 型ストッパー QL-55 (4 個セット)	5,200	対象物重量 56kg (4 本)
F00633296	T 型ストッパー QL-59 (4 個セット)	5,000	対象物重量 160kg (4 本)

※本商品は揺れによる対象物の転倒を最小限に抑えるものです。地震などで生じる損害に対して保証するものではありません。あらかじめご了承ください。